

## Oxivir Excel Wipe Acti

Șervețele de curățare și dezinfecție pentru suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive și pentru suprafețe dure

### Descriere


Oxivir Excel Wipes Acti, bazate pe tehnologia AHP, reprezintă alegerea ideală pentru curățare și dezinfecție într-un singur pas.

Un singur șervețel gata de utilizare pentru toate zonele de utilizare, pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor dure, precum și a suprafețelor dispozitivelor medicale neinvazive (doar pentru uz profesional).

### Proprietăți de bază

- Șervețel gata de utilizare, produs ideal pentru toate domeniile de utilizare, inclusiv sectorul medical, sectorul non-medical și sectorul alimentar
- Activitate virucidă completă
- Acțiune rapidă împotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii și drojdii
- Curățare superioară datorită sistemului de agenți tensioactivi de înaltă performanță
- Fără parfum
- Nu necesită clătire
- Substanțele active se descompun în apă și oxigen
- Produs biocid aprobat conform BPR
- Dispozitiv medical certificat


CE  
0044

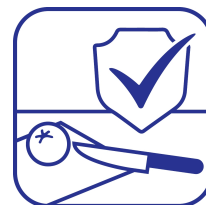

**Diversey Europe  
Operations B.V.**  
De Corridor 4,  
3621 ZB Breukelen,  
The Netherlands.  
[www.solenis.com](http://www.solenis.com)



**BPR  
APPROVED**

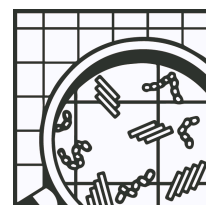

© A.I.S.E

# Oxivir Excel Wipe Acti

## Avantaje

- Oxivir Excel Wipes Acti oferă eficacitate cu spectru larg împotriva bacteriilor, drojdiilor și virusurilor în timpi scurți de contact, asigurând un nivel ridicat de dezinfecție împotriva numeroșilor agenți patogeni de interes.
- Produsul este aprobat conform BPR și testat extensiv conform normelor europene EN.
- Oxivir Excel Wipes Acti prezintă activitate virucidă completă, inclusiv eficacitate demonstrată împotriva virusurilor neînvelite, cum ar fi Polio, Adenovirus și Norovirus murin, precum și împotriva virusurilor învelite, cum ar fi Coronavirus, virus Vaccinia, HIV, HBV, HCV și virusul gripal.
- Oxivir Excel Wipes Acti oferă o performanță ridicată de curățare datorită agenților tensioactivi puternici, fiind nu doar un dezinfectant excelent, ci și un agent de curățare eficient.
- Formula AHP este delicată cu suprafețele, contribuind la prelungirea duratei de viață a echipamentelor și nu lasă reziduuri agresive pe suprafețe.
- Oxivir Excel Wipes Acti este potrivit pentru curățarea și dezinfecția zilnică a suprafețelor dure, precum și pentru utilizare în zone cu frecvență mare de atingere din retail, educație, sectorul alimentar, unități de îngrijire pe termen lung și alte sectoare, precum și în zone cu risc ridicat din spitale, cum ar fi săli de operație (OR), unități de terapie intensivă (ICU), unități de terapie intensivă neonatală (NICU) și saloane de pacienți.
- Nu este necesară utilizarea echipamentului individual de protecție (EIP/PPE), cu excepția utilizării prelungite.

## Instrucțiuni de utilizare

Șervețel gata de utilizare, nu necesită diluare. Utilizați la temperatura camerei:

- Îndepărtați murdăria vizibilă.
- Deschideți capacul, scoateți un șervețel și închideți capacul.
- Aplicați produsul prin umezirea completă a suprafeței neporoase și/sau a dispozitivului medical neinvaziv.
- Lăsați să acționeze 5 minute.
- Lăsați suprafața să se usuce la aer. Nu este necesară clătirea.
- Spălați mâinile după manipulare.

Rata de aplicare: 1,6 m<sup>2</sup> per șervețel.

## Date tehnice

Aspect:	Șervețel alb
Miros:	Neutru
pH (stare pură):	≈ 1.95
Densitate relativă (20°C):	≈ 1
Perioada de valabilitate:	2 ani de la producție (Data expirării: a se vedea ambalajul) 28 de zile de la deschidere
Substanță activă:	0,36% peroxid de hidrogen

Datele de mai sus sunt tipice producției normale și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

# Oxivir Excel Wipe Acti

## Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Instrucțiuni complete privind manipularea și eliminarea acestui produs sunt furnizate într-o Fișă cu Date de Securitate separată; [sds.solenis.com](https://sds.solenis.com). A se manipula în conformitate cu bunele practici de igienă industrială și securitate. A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale. A nu se amesteca cu alte produse decât dacă este recomandat de Diversey. A se depozita în ambalajele originale închise, ferit de temperaturi extreme. Produsul nu este destinat reutilizării. Numai pentru utilizatori profesioniști/specialiști.

## Atenție

Depozitați în următorul interval de temperatură: 6°C - 35°C. Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat. Păstrați departe de lumina soarelui. Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje. Produsul nu este destinat a fi reutilizat. Avertisment: Poate fi coroziv pentru metale.

## Echipament de protecție personală

**Orientarea completă privind EPP pentru acest produs este furnizată într-o fișă cu date de securitate separată; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).**

**PPE:** Utilizați echipamentul individual de protecție conform cerințelor. **Protecția mâinilor:** Clătiți și uscați mâinile după utilizare. Pentru contact prelungit poate fi necesară protecția pielii.

## Considerații privind eliminarea

Ghidul complet privind eliminarea acestui produs este furnizat într-o fișă cu date de securitate separată; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

## Compatibilitatea produselor

Oxivir Excel Wipes Acti este destinat utilizării ca dezinfectant pentru suprafețe dure, inclusiv suprafețe dure ale dispozitivelor medicale neinvazive. În condițiile de utilizare recomandate, Oxivir Excel Wipes Acti este adecvat pentru utilizare pe suprafețe precum oțel inoxidabil, crom, vinil, țesături din nailon, suprafețe laminate, sticlă, cauciuc, materiale plastice dure și flexibile (polipropilenă, poliuretan, polietilenă, PVC acrilic, fibră de sticlă și policarbonat). Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate. Oxivir Excel Wipes Acti nu este destinat a fi utilizat pe dispozitive medicale invazive. **Nu se amestecă cu alte produse. Nu este destinat suprafețelor poroase sau sensibile la acizi.**

## Date microbiologice

Domeniu de utilizare: PT2 sector medical în condiții murdare, PT2 sector non-medical în condiții murdare și PT4 suprafețe în contact cu alimentele în condiții murdare.

Aplicație	Eficacitate	Standardul EN	Microorganisme	Diluție	Timp de contact
Ștergere	Bactericid	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Gata deutilizare	5 min
	Drojdiicid	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucid	EN 14476	Adenovirus, Norovirus murin, Poliovirus		

# Oxivir Excel Wipe Acti

## Informații ecologice

Agenții tensioactivi utilizați în acest produs sunt biodegradabili în conformitate cu cerințele Regulamentului UE privind detergenții, CE 648/2004.

## Aprobări

- Biocid: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Organism notificat pentru dispozitive medicale: CE0044

[www.solenis.com](http://www.solenis.com)

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.16/03/2026 ro-RO (K02979)