

# Oxivir Excel Wipe Acti


Rengjørings- og desinfeksjonsservietter for ikke-invasivt medisinsk utstyr og ikke-porøse overflater

## Produktbeskrivelse

Oxivir Excel Wipe Acti, med AHP-teknologi, er et ideelt valg for rengjøring og desinfeksjon i ett steg. En bruksklar serviett som egner seg til alle bruksområder for rengjøring og desinfeksjon av harde overflater og overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr (kun for profesjonelt bruk).

## Produktegenskaper

- Klar til bruk, produktet egner seg til alle bruksområder, inkludert helsevesenet, ikke-helsevesenet og næringsmiddelindustrien
- Fullstendig virusdrepende
- Rask virkning mot et bredt spekter av virus, bakterier og gjær
- Overlegen rengjøring med høytytende overflateaktivt system
- Uten parfyme
- Ingen skylning nødvendig
- Brytes aktivt ned til vann og oksygen
- BPR-godkjent biocid
- Sertifisert medisinsk utstyr

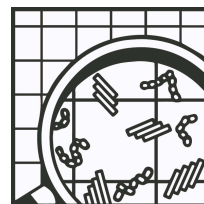

**BPR**  
APPROVED

**Diversey Europe**  
**Operations B.V.**  
De Corridor 4,  
3621 ZB Breukelen,  
The Netherlands.  
[www.solenis.com](http://www.solenis.com)



# Oxivir Excel Wipe Acti

## Produktfordeler

- Oxivir Excel Wipe Acti har et bredt spekter av effekt mot bakterier, gjær og virus med kort kontakttid og gir høyeste nivå av desinfeksjon mot flere utfordrende patogener.
- BPR-godkjent og grundig testet i samsvar med europeiske standarder.
- Oxivir Excel Wipe Acti har fullstendig virusdrepende effekt, inkludert dokumentert effektivitet mot ikke-kapslede virus som polio, adeno og murint norovirus, samt kapslede virus som koronavirus, vacciniavirus, HIV, HBV, HCV og influensa.
- Oxivir Excel Wipe Acti har overlegen rengjøringssevne takket være kraftige overflateaktive stoffer, noe som gjør det til både et utmerket desinfeksjonsmiddel og rengjøringsmiddel.
- AHP-formuleringen er skånsom mot overflater, forlenger utstyrets levetid og etterlater ingen harde rester.
- Oxivir Excel Wipe Acti er egnet for daglig rengjøring og desinfeksjon av harde overflater og for bruk i områder med mye berøring i detaljhandel, utdanning, matservering, omsorgsboliger og andre sektorer, samt i høyrisikoområder på sykehus som operasjonssaler, intensivavdelinger, nyfødtafdelinger og pasientrom.
- Ingen personlig verneutstyr er nødvendig, med mindre produktet brukes over lengre tid.

## Bruksanvisning

Klar til bruk, ingen fortykning nødvendig. Bruk ved romtemperatur:

- Fjern grovt smuss.
- Åpne lokket, ta ut én enkelt serviett og lukk lokket.
- Påfør produktet ved å fukte den ikke-porøse overflaten og/eller det ikke-invasive medisinske utstyret fullstendig.
- La virke i 5 minutter.
- La lufttørke. Overflaten trenger ikke å skylles.
- Vask hendene etter bruk.

Påføringsmengde: 1,5 m<sup>2</sup> per tørk.

## Tekniske data

Utseende:	Hvit klut
Lukt:	Nøytral
pH-verdi (konsentrert):	<2
Holdbarhet:	2 år etter produksjon (Utløpsdato: se emballasjen) 28 dager etter åpning
Virkestoff:	0,36 % hydrogenperoksid

Ovennevnte data er typiske for normal produksjon og bør ikke betraktes som spesifikasjoner.

## Informasjon om sikker håndtering og oppbevaring

Fullstendig veiledning om håndtering og avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Håndter i henhold til god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr. Ikke bland med andre produkter med mindre Diversey anbefaler det. Oppbevares i lukket originalemballasje. Unngå ekstreme temperaturer. Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Kun til profesjonelt bruk.

# Oxivir Excel Wipe Acti

## Advarsel

Oppbevares innenfor følgende temperaturområde: 6 °C - 35 °C. Ikke bruk dersom emballasjen er skadet. Beskytt mot direkte sollys. Håndteres i henhold til god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Holdes borte fra mat, drikke og dyrefôr. Produktet er ikke beregnet for gjenbruk. Advarsel: Kan være etsende for metaller.

## Personlig verneutstyr

Fullstendig veiledning om personlig verneutstyr for dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com).

**Personlig verneutstyr:** Bruk personlig verneutstyr etter behov. **Håndbeskyttelse:** Skyll og tørk hendene etter bruk. Ved langvarig kontakt kan det være nødvendig med hudbeskyttelse.

## Avfallshåndtering

Fullstendig veiledning om avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com).

## Produktkompatibilitet

Oxivir Excel Wipes Acti er beregnet for bruk som desinfeksjonsmiddel på harde overflater, inkludert harde overflater på ikke-invasive medisinske utstyr. Under anbefalte bruksforhold er Oxivir Excel Wipes Acti egnet for bruk på overflater som rustfritt stål, krom, vinyl, nylonstoffer, laminerte overflater, glass, gummi, hard og fleksibel plast (polypropylen, polyuretan, polyetylen, PVC-akryl, glassfiber og polykarbonat). Bruk utover de angitte områdene anbefales ikke. Oxivir Excel Wipes Acti er ikke beregnet for bruk på invasivt medisinsk utstyr. **Ikke bland med andre produkter. Ikke beregnet for porøse eller syrefølsomme overflater.**

## Mikrobiologiske data

**Bruksområde:** PT2 Helsetjenester under skitne forhold, PT2 Ikke-helsetjenester under skitne forhold og PT4 Overflater med matkontakt under skitne forhold

Anvendelse	Krav	EN Norm	Organismer	Fortynning	Kontaktid
Tørrking	Bakteriedrepende	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucidal	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

## Miljøinformasjon

De overflateaktive stoffene i dette produktet er biologisk nedbrytbare i samsvar med kravene i EUs vaskemiddelforordning, EC 648/2004.

## Godkjenninger

- Biocide: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Notifisert organ for medisinsk utstyr: CE0044

## Tilgjengelige emballasjestørrelser

Varenummer	Varenavn	Plattform
9316225	OXIVIR EXCEL WIPES ACTI 12X100PC W4940	Servietter

# Oxivir Excel Wipe Acti

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.11/12/2025 nb-NO (K02979)